



TORRES DE PURIFICACION AIRES TOTAL

Modelos Móviles - TOR

IDEALES PARA LA INSTALACION EN LABORATORIOS O SALAS DONDE SE REQUIERA UN AIRE LIMPIO DE OLORES , HUMOS Y CONTAMNANTES MICROBIOLÓGICOS

CARACTERÍSTICAS

• Las Torres de Purificación de Aire Total "EUROAIRE" están diseñadas para depurar el aire de lugares contaminados de humos, microorganismos, olores y contaminantes en general.

• Son unidades dotadas de ruedas para su fácil movilidad y actúan depurando unos caudales desde 350 hasta 800 m³/h, según modelo. Como ejemplo, en una habitación de 25 m², el aire recirculado y renovado a través de los filtros estaría comprendido entre 5 y 13 veces a la hora, según modelos.

Etapas de filtración de las Torres:

• Prefiltro lavable de eficacia del 98% para partículas de 5 micras de diámetro. Este prefiltro retiene las partículas más gruesas de polvo y humo y protegen y alargan la vida de los filtros de CARBON Y HEPA.

* Filtro de Carbón Activado especialmente tratado para la retención de gases y olores en general. Reduce los compuestos orgánicos volátiles como humo del tabaco y compuestos químicos, así como olores.

• Filtro H14 de eficacia 99,995% MPPS y 99,999% para partículas de 0,3 micras de diámetro según tests de D.O.P. y NaCl. Reduce la contaminación total de partículas como bacterias, virus, hongos, ácaros, etc...



TIEMPO/(HR)	CLASIFICACION AIRE SALA
0	Clase 1.000.000
2	Clase 100.000

La reducción de contaminantes es de 10 veces en tres horas.

REFERENCIAS PARA PEDIDOS

• MODELO TORRE –HC FILTROS CARBON + HEPA

360 X 1600 X 360 mm (ancho x alto x fondo)

Caudal: 350 m³/h, Peso 60 Kg

Voltaje 220 v, 700 w

Ref: 00-TORRE-HC

• MODELO TORRE QUIMICA FILTROS CARBON

360 X 1600 X 360 mm (ancho x alto x fondo)

Caudal: 350 m³/h, Peso: 60 kg

Voltaje 220 v, 700 w

Ref: 00-TORLIM-M



OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3

28100 – Alcobendas – Madrid - Spain

Tel. +34 902 103 578 Fax.+34 902 102 459

www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 609 472 406

Galicia. Tel. +34 639 486 955


Andalucía. Tel. +34 639 481 756

TORRES DE PURIFICACION DE AIRE



TORRES DE PURIFICACION AIRES TOTAL

DIAGRAMA DE FLUJO

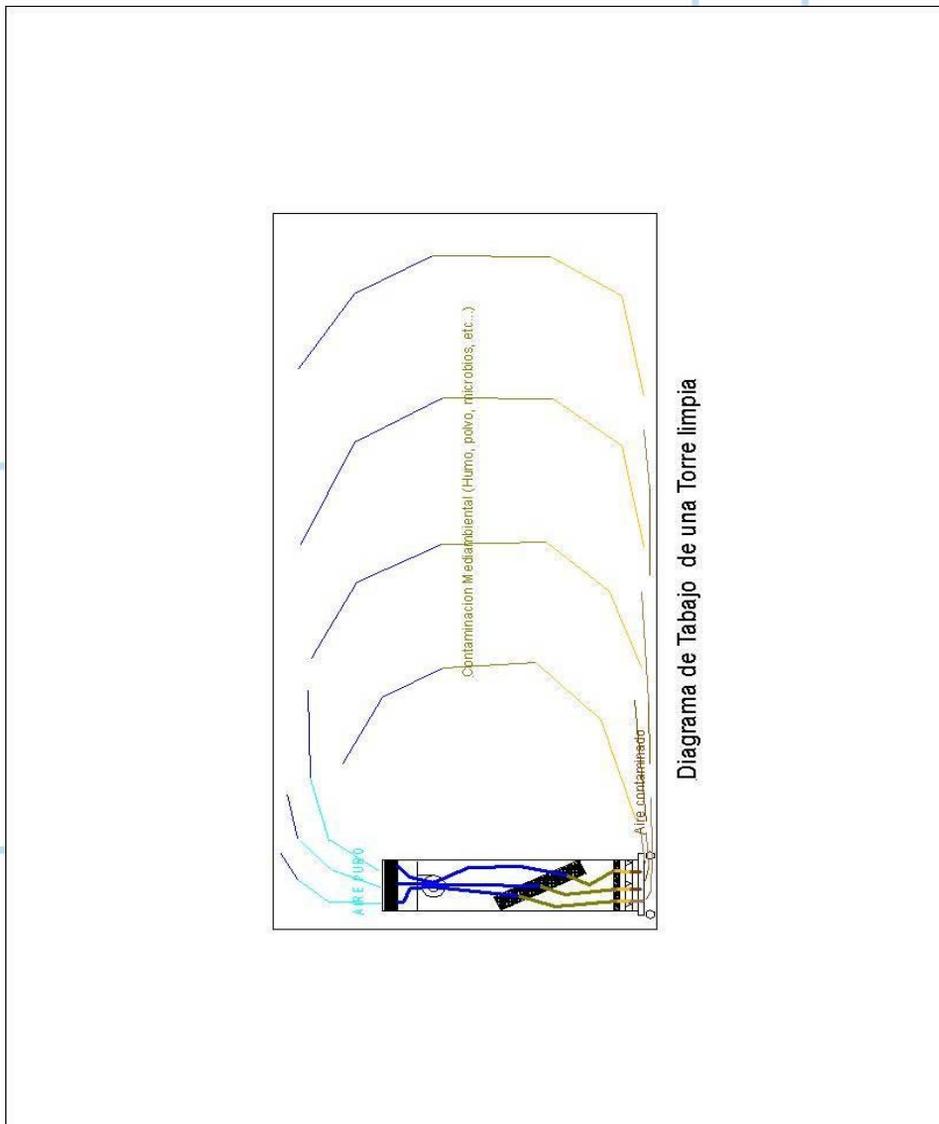

OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3

28100 – Alcobendas – Madrid - Spain

Tel. +34 902 103 578 Fax.+34 902 102 459

www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 609 472 406

Galicia. Tel. +34 639 486 955

Andalucía. Tel. +34 639 481 756