





Modelo LICES

CABINA + INCUBADOR CO₂

INTRODUCCIÓN

LICES es una estación de trabajo especial para la experimentación con células vivas. LICES está desarrollado para proporcionar el mismo entorno en el interior de la incubadora durante la observación y la experimentación para mantener la humedad, CO₂ y la temperatura necesaria.

FÁCIL DE USAR. LA ESTACIÓN MAS VERSÁTIL PARA TRABAJAR CON CELULAS VIVAS.

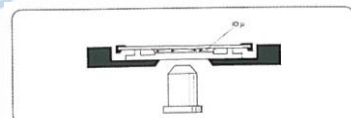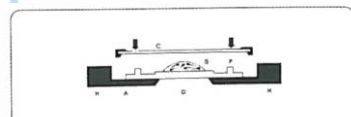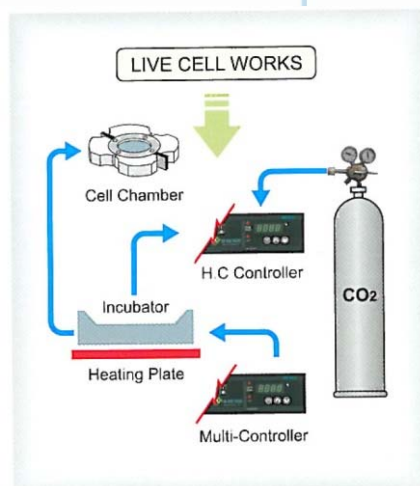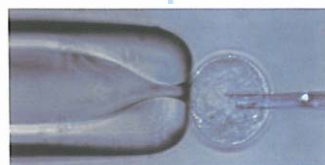

CARACTERÍSTICAS

- **Alta tasa de éxito del experimento:**

La tecnología para controlar la temperatura, humedad y CO₂ en ambiente de sala limpia mejora la tasa de éxito del experimento.

- **Sin estrés en la célula.** El sistema integrado reduce la influencia externa durante los experimentos relacionados con Células –Vivas.

- **Fácil de usar.**

- **Fácil de adaptar cualquier Microscopio.**



CABINA PARA CELULAS VIVAS

Modelo LICES

CARACTERISTICAS TECNICAS

		unidad	NB-801LCS
ESTACION TRABAJO			
CO2			Sensor IR de 2 canales
CO2 Rango Concentracion			0% hasta 10%
Precision CO2			.+/- 0,1 % a 5% a 37° C
Filtro HEPA			Filtro absoluto Hepa H14 con una eficacia de 99,9995% mpps según normativa EN1822
Humedad			60% --- 90%
Lámpara Fluorescente			30 w x 1
Lámpara UV			254 nm Germicida x 2
Flujo Aire			Flujo Laminar Vertical
Materiales			PC, Acero Inox y Acero con pintura epoxy
MULTI CONTROLADOR			
Rango de Temperatura	° C		Ambiente + 5° C ---- 60° C
Precisión Temperatura			.+/-0,1 °C a 37 °C
Incremento T			0,1 °C
Controlador			Controlador PID Digital
PLACA CALENTAMIENTO			
Placa			Calentamiento 6 lados
DIMENSIONES			
Area de trabajo	mm		730 x 700 x 800
Exteriores	mm		795 x 770 x 1195
Peso	Kg		130

INFORMACION PARA PEDIDOS

Código	Descripción	Dimensiones
27-NB-801LCS	ESTACION CELULAS (LICES) MADRE FLUJO LAMINAR, INCUBADOR CO2. MOD 801LCS	795X770X1195 mm



OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3

28100 – Alcobendas – Madrid - Spain

Tel. +34 902 103 578 Fax.+34 902 102 459

www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264

Galicia. Tel. +34 639 486 955

Andalucía. Tel. +34 639 481 756