

CARACTERÍSTICAS

- Las Cabinas de aspiración de gases series FAG/FAGV/RADIO están diseñadas para laboratorios modulares donde se requiere una ventilación segura, minimizando la exposición a contaminantes químicos y su inhalación.

FAG ASPIRACION HORIZONTAL


- Cabina de aspiración por flujo HORIZONTAL.
- Por su diseño facilita el total acceso a la zona de trabajo sin cristales intermedios y con protección total.
- Cristales laterales y superior adaptable a las dimensiones de la zona de trabajo.
- Dotada de motores de alto rendimiento y velocidad regulable.
- Filtro de carbón activado (hasta 25 Kg) de gran capacidad de retención, seleccionable entre una gama, según el tipo de contaminante a neutralizar.

FAGV/RADIO ASPIRACION VERTICAL

- Cabina de aspiración por flujo VERTICAL.
- Están construidas en acero pintado con epoxy y/o acero inoxidable en función del requerimiento del cliente. El frontal esta inclinado 10º y fabricado en PERPEX ó CRISTAL (6 mm o 10 mm para RADIO). Disponible en dos largos.
- Dotada de motores de alto rendimiento y velocidad regulable.
- Incluye iluminación fluorescente.
- Filtro de carbón activado de gran capacidad de retención, seleccionable entre una gama, según el tipo de contaminante a neutralizar.

Accesorios y opcionales:

- Construidas en acero inoxidable.
- Panel frontal de CIERRE COMPLETO.
- Adaptador conexión exterior tubo hasta 3 metros sin necesidad de un motor de apoyo.

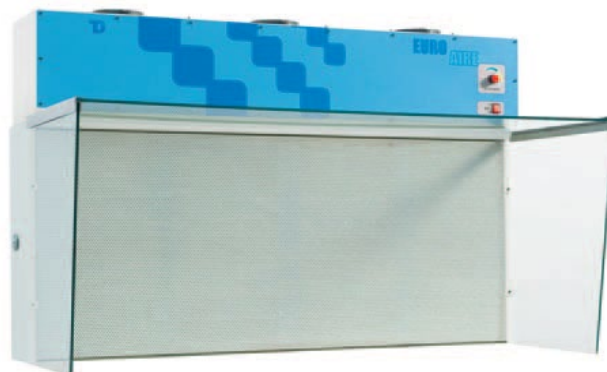

TIPOS DE CARBON:

- 00-740G Retención Genérica

Carbones IMPREGNADOS


- 00-VAPACID Retención Vapores ácidos (A)
- 00-VAPAMON Retención Amoníaco y Aminas (B/N).
- 00-CARVAPOX Retención Formaldehído (F).
- 00-VAPOMER Retención vapores mercurio (HG).
- 26-CARCRIA Retención Productos iodados (RADIO)

CABINAS DE ASPIRACION DE GASES


Modelos FAG/ FAGV/RADIO

DIMENSIONES

Dimensiones en milímetros (mm.)

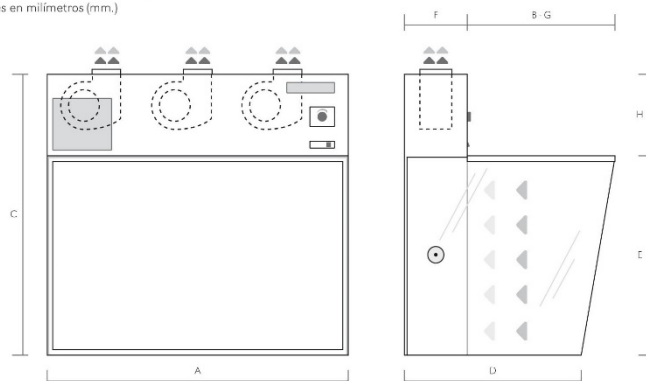

MODELOS HORIZONTALES	POTENCIA (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	PESO (Kg)
FAG110	210	1100	770	1000	720	710	230	540	290	150
FAG150	400	1500	770	1000	720	710	230	540	290	170

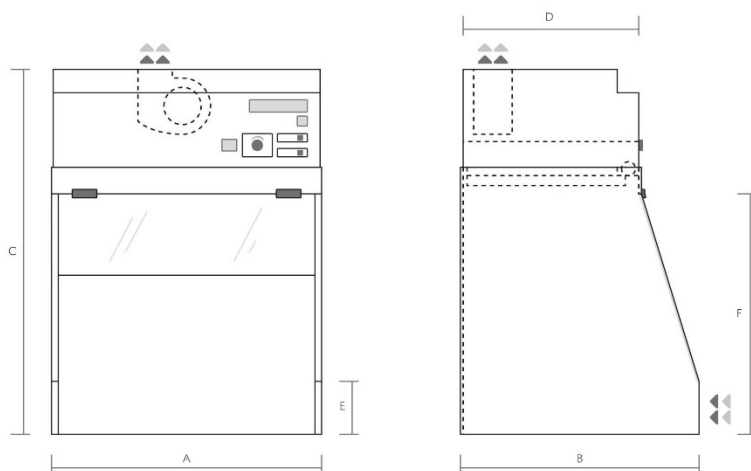

MODELOS VERTICALES	POTENCIA (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm) hasta cristal	F (mm)	PESO (Kg)
FAGV 80	210	815	720	1260	560	200	725	85
FAGV 120	210	1215	720	1260	560	200	725	120
FAGV 150	400	1515	720	1260	560	200	725	150
FAGV 180	400	1800	720	1260	560	200	725	200

OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3

28100 – Alcobendas – Madrid - Spain

Tel. +34 916 624 473 Fax.+34 916 624 469

www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264

Galicia. Tel. +34 639 486 955

Andalucía. Tel. +34 639 481 756



CABINAS DE ASPIRACION DE GASES

Modelos FAG/ FAGV/RADIO

REFERENCIAS PARA PEDIDOS

Código	Descripción
00-FAG110	Cabina de aspiración de gases HORIZONTAL carbón genérico Modelo FAG 110
00-FAG110A	Cabina de aspiración de gases HORIZONTAL carbón Ácidos Modelo FAG 110
00-FAG110N	Cabina de aspiración de gases HORIZONTAL carbón Amoniacó Modelo FAG 110
00-FAG110F	Cabina de aspiración de gases HORIZONTAL carbón Formaldehído Modelo FAG 110
00-FAG110HG	Cabina de aspiración de gases HORIZONTAL carbón Vapores Mercurio Modelo FAG 110
00-FAG150	Cabina de aspiración de gases HORIZONTAL carbón genérico Modelo FAG 150
00-FAG150A	Cabina de aspiración de gases HORIZONTAL carbón Ácidos Modelo FAG 150
00-FAG150N	Cabina de aspiración de gases HORIZONTAL carbón Amoniacó Modelo FAG 150
00-FAG150F	Cabina de aspiración de gases HORIZONTAL carbón Formaldehído Modelo FAG 150
00-FAG150HG	Cabina de aspiración de gases HORIZONTAL carbón Vapores Mercurio Modelo FAG 150
00-FAGV80	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón genérico Modelo FAGV
00-FAGV80A	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Ácidos Modelo FAGV Acero Inox AISI 304 CRISTAL
00-FAGV80B	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Amoniacó Modelo FAGV
00-FAGV80F	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Formaldehído Modelo FAGV
00-FAGV80F-AC	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Formaldehído Modelo FAGV ACERO INOXIDABLE
00-FAGV80HG	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Vapores Mercurio Modelo FAGV
00-RADIO80	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Productos Iodados Modelo FAGV (met 10 mm)
00-FAGV120	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón genérico Modelo FAGV
00-FAGV120A	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Ácidos Modelo FAGV Acero Inox AISI 304 CRISTAL
00-FAGV120B	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Amoniacó Modelo FAGV
00-FAGV120F	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Formaldehído Modelo FAGV
00-FAGV120F-AC	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Formaldehído Modelo FAGV ACERO INOXIDABLE
00-FAGV120HG	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Vapores Mercurio Modelo FAGV
00-RADIO120	Cabina de aspiración de gases VERTICAL carbón Productos Iodados Modelo FAGV (met 10 mm)
52-MSOPFA80-D	Mesa soporte desmontable para Cabina Modelo FAGV80 800 X 705 X 750 MM



OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3
28100 – Alcobendas – Madrid - Spain
Tel. +34 916 624 473 Fax.+34 916 624 469
www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264
Galicia. Tel. +34 639 486 955
Andalucía. Tel. +34 639 481 756