


Modelos Generales

INTRODUCCIÓN

Los Baños de Agua mantienen la temperatura constante y son muy convenientes para examen de grasa, incubación de células, reacción de fermento, extracción por solventes en ensayos clínicos, tecnología médica, farmacia, microbiología.

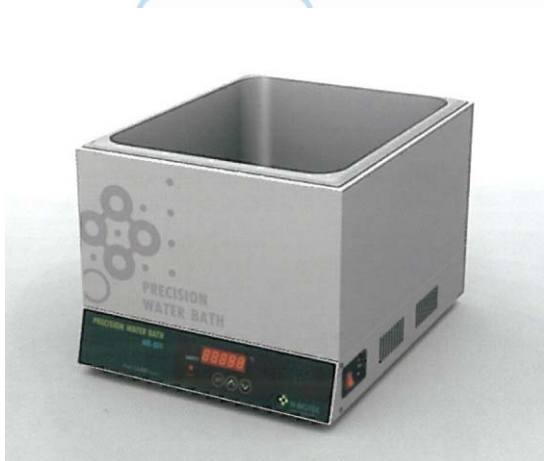


CARACTERÍSTICAS

- **El Sistema de inteligencia Artificial (NB TAC Sys)** mantiene la condición termostática precisa y es controlado por MICOM.
- **La alta temperatura** está controlada por un termostato inteligente incluso en el caso de que no exista circulación de agua.
- **El calentador de cámara** se encuentra fuera de la parte inferior de la cámara de agua, no dentro de la cámara.
- **La pantalla de LED** indica la Temperatura, Velocidad, Tiempo y Estado de Fallo de Alimentación.
- Incorpora un ajuste muy conveniente de nivel de agua, con niveles de escala grabados en la cámara.

BAÑOS DE AGUA

Modelos Generales

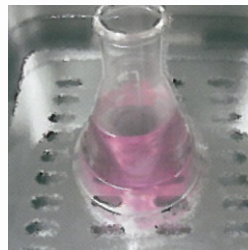

Bandeja

Nivel Agua

Temperatura Uniforme

Tapa Baño

CARACTERISTICAS TECNICAS

	unidad	NB-301	NB-301L
Rango Temperatura	° C	Ambiente + 5°C hasta 100 °C	Ambiente + 5°C hasta 100 °C
Precision	° C	.+/- 0,1 °C a 37 °C	.+/- 0,1 °C a 37 °C
Controlador	° C	Microprocesador PID digital	Microprocesador PID digital
Capacidad del Baño	litros	12 l	22 l
Dimensiones interiores	mm	240 (W) x 300(D) x 150(H)	500 (W) x 290(D) x 150(H)
Dimensiones Exteriores	mm	270 (W) x 345(D) x 150(H)	555 (W) x 390(D) x 230(H)
Potencia	V/Hz	110/220 v, 50/60Hz, 300 W	110/220 v, 50/60Hz, 600 W
Peso	Kg	7 kg	14 Kg

INFORMACION PARA PEDIDOS

Código	Descripción	Dimensiones
27-NB-301	BAÑO AGUA 12 LITROS, MODELO 301	270 X 345 X 225 mm
27-NB-301L	BAÑO AGUA 22 LITROS, MODELO 301 L	555 X 390 X 230 mm
27-3034BC12	TAPA PARA BAÑO DE 12 LITROS (301)	
27-3034BC24	TAPA PARA BAÑO DE 24 LITROS (301 L)	

OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3

28100 – Alcobendas – Madrid - Spain

Tel. +34 902 103 578 Fax.+34 902 102 459

www.tdi.es ventas@tdi.es

DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264

Galicia. Tel. +34 639 486 955

Andalucía. Tel. +34 639 481 756