

## Modelos NB-305CB/NB305TB

### INTRODUCCIÓN

Los Bloques Térmicos son usados en experimentos para reacciones de fermentación y análisis, extracción de solventes. Incubación de células, tratamientos de calor en tubos de ensayo, así como también para concentración y desintegración de muestras. En general en todas aquellos experimentos que necesiten conseguir una rápida y uniforme temperatura de calentamiento.


En el modelo NB-305TB es posible usar dos bloques al mismo tiempo.





NB-305CB



NB-305TB

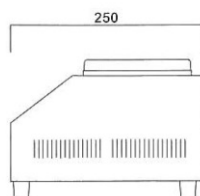

NB-305CB

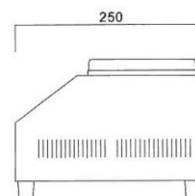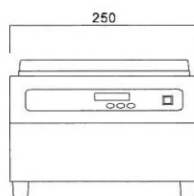

NB-305TB





### CARACTERISTICAS

- Esta provisto de una tapa transparente para asegurar la estabilidad térmica y permitir una fácil visión de las muestras.
- Los Modelos pueden trabajar con uno o dos bloques simultáneamente para acomodar una variedad de tamaños de tubos (NB-305TB).
- En el Modelo NB-305CB el control de temperatura mediante microprocesador se puede ajustar desde -4°C hasta 80°C.

# BLOQUES TERMICOS

## Modelos NB-305CB/NB305TB

### ACCESORIOS

					
BL-0.5/42 BS-0.5/18	BL-1.5/30 BS-1.5/15	BL-10/20 BS-10/08	BL-15/20 BS-15/08		

### CARACTERISTICAS TECNICAS

	unidad	NB-305CB	NB-305TB
Rango Temperatura	° C	desde - 4°C hasta 80 °c	Ambiente + 5°C hasta 120 °C
Precision	° C	.+/- 0,1 °C	.+/- 0,1 °C
Sistema		Peltier	Calentador
Controlador		Microprocesador PID digital	Microprocesador PID digital
Panel de Control		Botones "Touch"	Botones "Touch"
Pantalla		LED 5 DIGITOS	LED 5 DIGITOS
Material del Bloque		Aluminio Anodizado	Aluminio Anodizado
Capacidad del Bloque		1 Bloque grande, 2 bloques pequeños	2 Bloques grandes, 4 bloques pequeños
Dimensiones Exteriores	mm	250 (W) x 250(D) x 175(H)	250 (W) x 250(D) x 175(H)
Potencia	V/Hz	110/220 v, 50/60Hz, 100 W	110/220 v, 50/60Hz, 130 W
Peso	Kg	5 kg	5 Kg

### INFORMACION PARA PEDIDOS

Código	Descripción	Dimensiones
27-NB-305CB	BLOQUE TERMICO MOD CB -4°C A 80°C	250x250x175(mm)
27-NB-305TB	BLOQUE TERMICO MOD TB +5°C A 120°C	250x250x175(mm)
27-305BS/0,5/1,5/10/15	BLOQUE PEQUEÑO CAP. 0,5/18T(8),1,5/15T(11),10/8T(13),15/8T(16,5) (mm)	55x90x45(mm)
27-305BL/0,5/1,5/10/15/50	BLOQUE GRANDE CAP. 0,5/18T(8),1,5/15T(11),10/8T(13),15/8T(16,5),50/8T(30) (mm)	110x90x45(mm)

#### OFICINA PRINCIPAL

José Echegaray, 8 Local 1-3  
28100 – Alcobendas – Madrid - Spain  
Tel. +34 902 103 578 Fax.+34 902 102 459  
[www.tdi.es](http://www.tdi.es) ventas@tdi.es

#### DELEGACIONES

Catalunya. Tel. +34 676 351 264  
Galicia. Tel. +34 639 486 955  
Andalucía. Tel. +34 639 481 756